



BEDIENUNGSANLEITUNG


VOR GEBRAUCH LESEN

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|---|-------|
| Über Androvacuum® Manual | 2 |
| Bestandteile | 3 |
| Medizinische Hinweise | 4 |
| Bestandteile für Ihre Penisgröße auswählen | 5 |
| Anweisung zur Systembenutzung | 6 |
| Anleitung für die Behandlung von Erektionsstörungen | 8 |
| Verwendung des Gerätes (Schritt-für-Schritt) – Erektionsstörungen | 9 |
| Anleitung für die „sexuelle Fitness“ Therapie | 10 |
| Verwendung des Gerätes (Schritt-für-Schritt) – „Sexuelle Fitness“ | 11 |
| Der ADAM Test | 12 |
| Häufige Probleme und Lösungen | 13 |
| Vorsichtsmassnahmen | 14 |

ÜBER Androvacuum®

Androvacuum® ist eine medizinisch geprüfte, erstklassige Penispumpe. Sie ist eine nicht invasive, sichere und wirksame Lösung, um eine **sexuelle Fitness** Behandlung durchzuführen, eine sofortige Erektion ohne Medikamente hervorzurufen und **Erektionsstörungen entgegenzuwirken**.

Ergonomisch entworfen und hergestellt, besteht **Androvacuum®** aus einem Zylinder der über dem Penis positioniert werden kann. Ferner verfügt er über ein Vacuum Handbuch System, der einen Sog erzeugt und somit eine Vakuumumgebung um den Penis herum hervorruft und Blut in den Penis zieht, der ihm so dabei hilft zu versteifen.

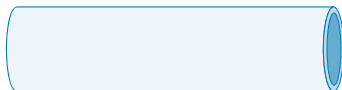

Vakuumzylinder



Vacuum Handbuch System



Pufferring



Dichtungsgel

Anmerkung: Lesen Sie diese Anweisung gründlich und vollständig bevor Sie den **Androvacuum®** benutzen. Falls die Anweisungen nicht befolgt werden, wird der **Androvacuum®** nicht funktionieren.

Pufferring: Individuell angepasste Einlagen für verschiedene Penisgrößen, die an der Zylinderöffnung angebracht werden müssen, nachdem der Ring an dem Zylinder angebracht und der Trichter entfernt wurde.




Manueller Vakuumblassknopf
erlaubt die Reduzierung des Vakuums



Dichtungsgel
für den persönlichen Gebrauch

Vacuum Handbuch System
erzeugt eine schnelle Abdichtung

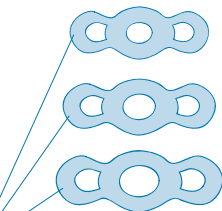

Medizinischer abnehmbarer Zylinder

Trichter, der an dem Zylinder angebracht werden kann, um die Anbringung des Rings auf dem Zylinder zu erleichtern.

Erektions-Assistenzring / Konstriktionsring:
um die Erektion aufrecht zu erhalten. Für verschiedene Penisdurchmesser.

Erektionsstörungen

Androvacuum® wurde für die Behandlung von Erektionsstörungen entwickelt. Es wird davon ausgegangen, dass Millionen von Männern betroffen sind. Erektionsstörungen können ein Zeichen für die Existenz von gravierenden Nerven- bzw. Blutflussstörungen sein. Erektionsstörungen können als Nebenwirkungen während der Einnahme von Medikamenten auftreten. Wenn Sie hiervon ausgehen, sollten Sie einen Arzt konsultieren. Sie sollten die Medikamentendosierung niemals ändern oder beenden, ohne vorher einen Arzt aufgesucht zu haben. Ferner können Zigaretten-, Alkohol- oder Drogenmissbrauch zu Erektionsstörungen führen.

Die Therapie von Erektionsstörungen mit **Androvacuum®** wird empfohlen bei:

- Männern die aufgrund von Stress, Aufregung oder Angst teilweise keine volle Erektion erhalten.
- Männern die leicht eine Erektion bekommen, diese aber nicht aufrecht erhalten können.
- Männern jeden Alters mit Erektionsproblemen. Sogar für diejenigen, die für mehrere Jahre keine Erektionen mehr hatten.
- Männern mit Erektionsproblemen, die keine ED-Medikamente, aufgrund von Herzbeschwerden, nehmen dürfen.

„Sexuelle Fitness“


Die Vakuumumgebung erhöht den Blutfluss im Penis. Hierdurch wird dieser steif. Mit der Zeit passt sich der Corpus Cavernosum dem erhöhten Blutfluss, der durch das Vakuum hervorgerufen wird, an. Somit erzeugt der Penis den notwendigen Blutfluss selbst, auch wenn vorher keine Vakuumumgebung hervorgerufen wird. Dies bedeutet, dass das Geschlechtsorgan schneller und intensiver auf sexuelle Stimulation reagiert. Ein länger anhaltendes Erektionsproblem kann zur Verkleinerung des Penistgewebe und einer Reduzierung des Blutflusses im Penis führen („Non-use Atrophy“). Ein regelmäßiger Gebrauch von **Androvacuum®** wird die Anzahl nächtlicher Erektionen verdoppeln, die Penisverkleinerung beheben, den Blutfluss im Penis erhöhen und einen guten gesundheitlichen Zustand des Penis unterstützen. **Androvacuum®** kann dabei helfen das Gewebe zu seiner normalen Größe innerhalb von nur 4 Wochen auseinander zu ziehen und den Blutfluss im Penis positiv beeinflussen. Zur selben Zeit, werden Sie eine volle Steifheit und eine Unterstützung der Gesundheit des Penis erhalten.

Die „sexuelle Fitness“ Therapie mit **Androvacuum®** wird empfohlen bei:

- Männern mit schwachen Erektionen.
- Männer, die eine schrittweise Abnahme ihrer Erektionen, aufgrund des Alterungsprozesses, eines trägen Lebens, Alkohol- oder Tabakgenusses oder einen hohen Cholesterin- oder Stresswerten feststellen können.
- Männern mit einem niedrigen Testosteronspiegel (TDS oder Hypogonadismus) und/oder die sich einer Hormonbehandlung unterziehen.


WÄHLEN SIE DIE PASSENDE BESTANDTEILE AUS UND BEREITEN SIE DAS GERÄT VOR

1. Beginnen Sie mit dem größten Erektion-Assistenz- und Pufferring. Falls es Ihnen nicht möglich ist das Vakuum mit dem größten Ring aufrecht zu erhalten, nutzen Sie den nächst kleineren Erektion-Assistenz- und Pufferring, solange Sie in der Lage sind das Vakuum und die Erektion aufrecht zu erhalten.
2. Positionieren Sie den Zylinder (mit dem glatten Ende oben) auf einer flachen Oberfläche. Setzen Sie den Trichter auf die Zylinderöffnung.
3. Schmieren Sie die gesamte Trichteroberfläche mit dem Dämpfungsgel ein.
4. Packen Sie die beiden Schlaufen des Erektion-Assistenzring so wie dargestellt. Platzieren Sie Ihre Daumen neben den Trichter und ziehen Sie die rechte Seite nach unten. Hierbei sollte Ihr Daumen am Trichter entlang gleiten. Platzieren Sie den Erektion-Assistenzring nah des Zylinderanfangs, um ihn so später leichter am Penis anzubringen (versuchen Sie nicht den Ring ohne Trichter anzubringen. Er könnte reißen).

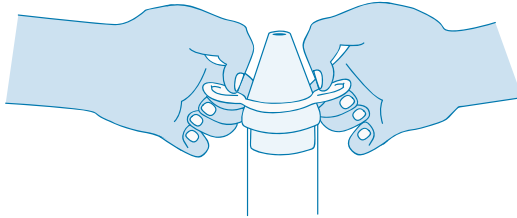


5. Entfernen Sie den Trichter und bringen Sie den Zylinder am Vacuum Handbuch System an. Drehen Sie den Vacuum Handbuch System zu 90° bis dieser im Zylinder einhakt. Überschrauben Sie den Vacuum Handbuch System nicht. Setzen Sie den Pufferring in das offene Ende des Zylinders.
6. Um ein Beschlagen des Zylinders zu vermeiden, sollten Sie vor dem Gebrauch warmes Wasser über diesen gießen.

ZUR ENTFERNUNG DREHEN UND ZIEHEN

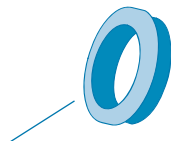


Pufferring

oder individuelle Größeneinlagen

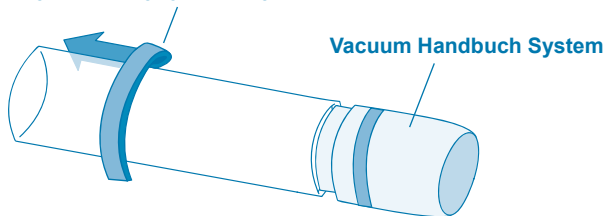

Vacuum Handbuch System

EREKTION-ASSISTENZRING

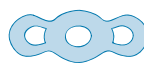

Einer der wichtigsten Schritte ist die richtige Anbringung des Erektion-Assistenzrings. Um Blut im Penis zu behalten, muss der Ring angenehm und stramm, nicht aber enger als nötig sitzen. Falls **Androvacuum®** bei Ihnen eine gute Erektion hervorruft, der Erektion-Assistenzring jedoch nach 5 Minuten lose am Penis sitzt, sollten Sie den nächst kleineren Ring tragen. Die maximale, empfohlene Tragezeit für den Erektion-Assistenzring beträgt 30 Minuten. Falls er länger getragen wird, kann es zu permanenten Schäden führen.

Nachdem die korrekte Ringgröße ausgewählt wurde, wird es nur einige Minuten dauern eine Erektion hervorzurufen.

TRAGEN SIE DEN EREKTION-ASSISTENZRING NIE LÄNGER ALS 30 MINUTEN.

Androvacuum® wird Ihnen dabei behilflich sein, eine volle und befriedigende Erektion in den meisten Fällen hervorzurufen.

- ❑ Warten Sie mindesten 60 Minuten zwischen den Anwendungen.
- ❑ Schlafen Sie nicht, während des Tragens des Erektion-Assistenzring ein.
- ❑ Der Erektion-Assistenzring sollte nicht als Verhütungsmittel genutzt werden.
- ❑ Benutzen Sie den größten Erektion-Assistenzring mit dem die Erektion aufrecht erhalten werden kann.
Benutzen Sie den Erektion-Assistenzring nicht unter Alkohol oder Drogeneinfluss.
- ❑ Ein häufiger Gebrauch des Erektion-Assistenzrings kann zu Blutergüssen an der Penisbasis führen (die Stelle an der der Penis auf den Körper trifft). Temporäre Nebenwirkungen können Blutergüsse und kleine rötliche Flecken unter der Haut sein. Seien Sie vorsichtig und benutzen Sie ausreichend wasserlösliches Gleitmittel um den Erektion-Assistenzring zu entfernen.

Benutzen Sie keine auf Öl basierende Gleitmittel, wie z.B. Vaseline, da diese angreifend auf die Erektion-Assistenzringe und andere auf Latex basierende Materialien, wie z.B. Kondome, wirken können. Nutzen Sie nur wasserlösliche Gleitmittel und Dämpfungsgels.

MANUELLER VAKUUMREDUZIERUNGSKNOPF UND DIE ERZEUGUNG EINER VAKUUMUMGEBUNG

Ihr Penis sollte sich in **10 bis 90 Sekunden** schmerzfrei aufrichten und versteifen. Es ist normal, wenn Sie bei der Versteifung des Penis einen gewissen Druck verspüren. Falls Sie einen leichten Schmerz bei der Erzeugung der Erektion verspüren, sollten Sie ein geringeres Vakuumniveau erzeugen. Dies können Sie durch das Drücken des manuellen Vakuumreduzierungsknopf erreichen. Mit ein wenig Übung sollten Sie schnell, das für Sie richtige Vakuumniveau finden, mit dem Sie im Stande sind eine volle Erektion zu erzeugen.


Um das Vakuum zu verringern kann der manuelle Vakuumreduzierungsknopf gedrückt werden. Falls das Vakuum zu sehr nachlässt, können Sie dieses einfach durch das Drücken des Aktivierungsknopfes wieder verstärken.

Um den Zylinder vom Penis zu entfernen, drücken Sie den manuellen Vakuumreduzierungsknopf solange bis das Vakuum verschwunden ist. Hiernach können Sie den Zylinder problemlos entfernen.

Bei den meisten Menschen mit Erektionsstörungen wird die Erektion schnell nachlassen, nachdem der Zylinder entfernt wurde. Dies kann man verhindern, indem der Erektion-Assistenzring korrekt angebracht wird. Andererseits kann es auch möglich sein, dass der Erektion-Assistenzring nicht benötigt wird um eine ausreichende Erektion aufrechtzuerhalten und Geschlechtsverkehr zu haben. Es ist durchaus möglich ein erfülltes Sexualleben zu haben, indem Sie nur den **Androvacuum®**, nicht aber die Erektions-Assistenzringe benutzen.

ENTFERNUNG DES ERECTION-ASSITENZRINGS

Achtung: Tragen Sie den Erektion-Assistenzring **nicht länger als 30 Minuten**.

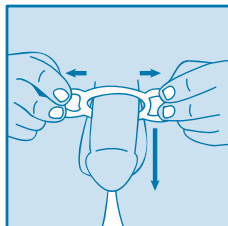

Entfernen Sie den Ring, indem Sie die äußeren Schlaufen nach außen ziehen. Der Ring wird sich so dehnen, was dazu führt, dass das Blut aus dem Penis fließt. Somit können Sie den Erektion-Assistenzring leicht entfernen. Um ein Verwickeln des Schamhaars mit dem Ring vorzubeugen, können Sie etwas Dichtungsgel in das Haar schmieren bevor Sie den Ring anbringen.

1. Schmieren Sie Ihren Penis, das Innere des Zylinders und den Schamhaarbereich (die Zone, die mit dem Erektion-Assistenzring in Kontakt kommt) mit dem Dichtungsgel ein. Dies hilft dabei ein dichtes Vakuum zu schaffen und verhindert, dass der Penis an der Zylinderwand kleben bleibt.
2. Positionieren Sie Ihren Penis in den Zylinder und beginnen Sie mit dem Vakuumaufbau. Nutzen Sie das geringste Vakuum, dass für die Erzeugung einer Erektion notwendig ist.
3. Nachdem sich die gewünschte Erektion eingestellt hat können Sie den zuvor am Zylinder angebrachten Erektion-Assistenzring an der Penisbasis anbringen. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Ring vollständig an der Penisbasis anbringen. Das Vakuum kann dann durch das Drücken des manuellen Vakuumreduzierungsknopfes entfernt werden. Üben Sie einige Male ohne den Erektion-Assistenzring zu benutzen.

Anmerkung 1. Nachdem Sie das System für 30 bis 60 Tage benutzt haben, ist es empfehlenswert die richtige Ringgröße zu kontrollieren. So kann es durchaus sein, dass ein Tragen des nächst größeren Rings für Sie angenehmer ist.


Anmerkung 2. Für einige Paare kann es empfehlenswert sein, den Geschlechtsverkehr zu unterbrechen und den **Androvacuum®** erneut zu benutzen.

Anmerkung 3. Falls gewünscht wird ein Kondom zu benutzen, sollten Sie dieses nachdem sich die Erektion eingestellt hat, anbringen.


Anmerkung 4. Nach dem Gebrauch können der Erektion-Assistenzring, der Pufferring und der Zylinder mit Seife und wasser gereinigt werden. Vergewissern Sie sich, dass die Tasche für die Aufbewahrung der Erektion-Assistenzringe luftdicht geschlossen wird, um so eine längere Lebensdauer zu gewährleisten.

ACHTUNG


Wenn Sie den Vacuum Handbuch System auf dem Zylinder anbringen, **ÜBERDREHEN SIE DIESEN NICHT**. Um den Vacuum Handbuch System anzubringen ist eine 90° Drehung ausreichend. Falls Sie zu weit drehen, wird dies das System beschädigen. Solch ein Schaden wird nicht von der Garantie gedeckt!

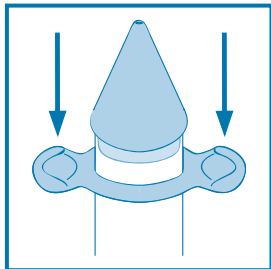


1. Ziehen Sie den Erektion-Assistenzring mit Hilfe des Trichters bis zum Anfang des Zylinders.

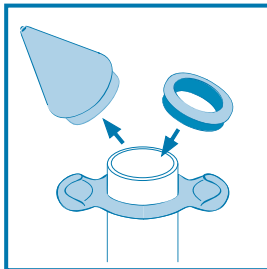


2. Entfernen Sie den Trichter und bringen Sie die Puffering an.

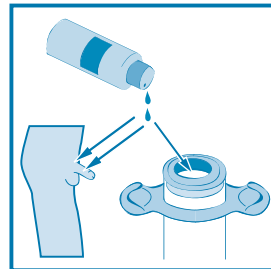


3. Schmieren Sie den Penis, das Innere des Zylinders und Ihren Schambereich mit dem Dämpfungsgel ein.

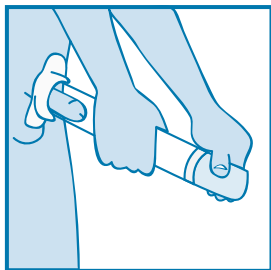

4. Positionieren Sie Ihren Penis in den vorbereiteten Zylinder.

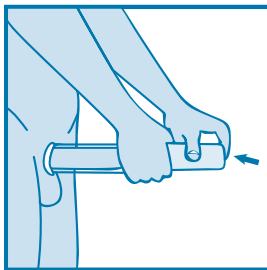

5. Beginnen Sie mit dem Vakuumprozess.

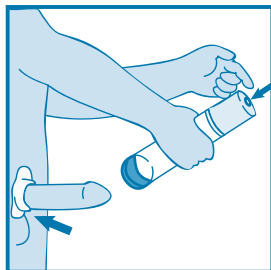


6. Nachdem sich die Erektion eingestellt hat, können Sie den Erektion-Assistenzring an der Penisbasis anbringen. Hiernach sind Sie für den Geschlechtsverkehr bereit.

ANLEITUNG FÜR DIE „SEXUELLE FITNESS“ THERAPIE

Befolgen Sie die Schritte 1 und 2, die auf der Seite 8 beschrieben werden.

Der tägliche, therapeutische Gebrauch von **Androvacuum®**, zwischen 5 und 7 Tage pro Woche, kann dabei behilflich sein die Penislänge beizubehalten, die Arterien zu erweitern und eine bessere Durchblutung des Penissgewebes fördern. Ein regelmäßiger Gebrauch von **Androvacuum®** kann eine vollständige erektile Funktion des Penis unterstützen. Um mit der Behandlung zu beginnen, benötigen Sie folgende Komponenten:

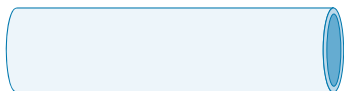

Vakuumzylinder



Vacuum Handbuch System




Pufferring




Dichtungsgel

Es ist nicht notwendig die Erektion-Assistenzringe zu benutzen. Sie wurden entworfen um Blut im Penis zu halten und eine für sexuelle Aktivitäten ausreichende Erektion zu erzeugen. Diese Penissteifheit ist für die Sexuelle Fitness Therapie nicht notwendig.

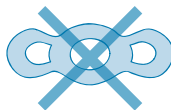


Erektion-Assistenzring


Während einer sexuellen Fitness Behandlung empfehlen wir Ihnen fünf Erektionen hervorzurufen oder den **Androvacuum®** für ungefähr 5-10 Minuten zu gebrauchen. Erzeugen Sie niemals ein so starkes Vakuum, dass sich Schmerzen einstellen.

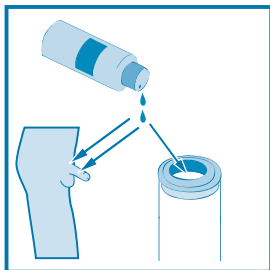


1. Schmieren Sie das Dämpfungsgel an den Rand des Vakuumzylinders und den gesamten Penis mit dem Dämpfungsgel ein.

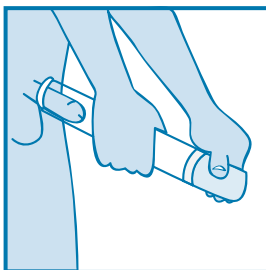


2. Positionieren Sie den Penis in dem Zylinder.

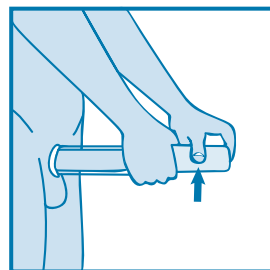


3. Betätigen Sie den Vacuum Handbuch System für 10 Sekunden und warten Sie für 5 bis 10 Sekunden, um so langsam ein Vakuum zu erzeugen. Wiederholen Sie diesen Vorgang gegebenenfalls.

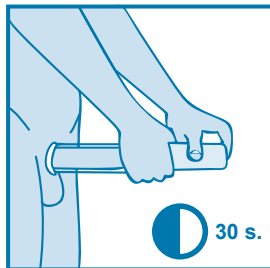

4. Nachdem Sie eine vollständige Erektion erzeugt haben, warten Sie für 30 Sekunden bis Sie das Vakuum ablassen

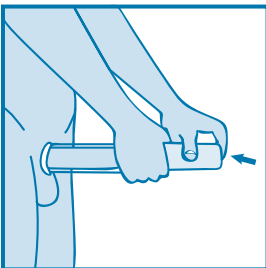

5. Nach 30 Sekunden können Sie den Druck im Zylinder durch das Drücken des roten Knopfes entfernen.

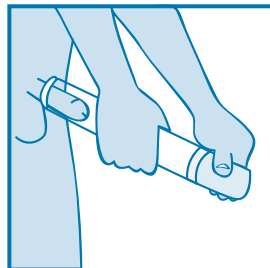

6. Warten Sie bis der Penis wieder schlaff geworden ist und wiederholen den Start-und-Stop Prozess bis sich eine neue Erektion eingestellt hat.

Der ADAM Test ist ein 1-minütiger Test um das Testosteron-Mangel-Syndrom zu überprüfen. ADAM steht für „Androgen Deficiency in Aging Males“.

Der ADAM Test wurde erstmals in **Morley JE, Charlton E, Patrick P, Kaiser FE, Cadeau P, McCready D, et al.** „Validation of a screening questionnaire for androgen deficiency in aging males“. Metabolism 2000; 49:1239–42. veröffentlicht.

Sie können eine erste Einschätzung zu Ihrem Testosteronspiegel erhalten, indem Sie folgende Fragen beantworten:

- | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Haben Sie eine Abnahme Ihrer Libido (sexuellen Lust) feststellen können? | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| 2. Fehlt es Ihnen an Energie? | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| 3. Haben Sie eine Abnahme in Körperstärke und Ausdauer feststellen können? | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| 4. Haben Sie an Körpergröße verloren? | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| 5. Konnten Sie einen Abfall an Lebensfreude feststellen? | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| 6. Sind Sie traurig und/oder mürrisch? | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| 7. Sind Ihre Erektionen schwächer? | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| 8. Haben Sie kürzlich eine Abnahme in Ihren sportlichen Fähigkeiten festgestellt? | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| 9. Schlafen Sie oft nach dem Abendessen ein? | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| 10. Haben Sie kürzlich eine Abnahme Ihrer beruflichen Leistung feststellen können? | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Falls Sie alle Fragen mit „Nein“ beantwortet haben, benötigen Sie höchstwahrscheinlich keinen weiteren Test.

Falls Sie die Fragen 1 bis 7, oder mindestens drei oder mehr Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, könnte ein niedriger Testosteronspiegel der Grund hierfür sein und Sie sollten sich mit einem Arzt in Verbindung setzen.

HÄUFIGE PROBLEME UND LÖSUNGEN

| PROBLEM | WAHRSCHEINLICHE URSACHE | LÖSUNG | KOMMENTAR |
|--|--|--|--|
| Keine Erektion | Kein Vakuum aufgrund von Lufteintritt durch schlechte Abdichtung | Nutzen Sie mehr Dichtungsgel; Üben Sie einen größeren Druck auf den Körper aus; Kürzen Sie Ihr Schamhaar; Überprüfen Sie das System nach Stellen, an denen Luft eintreten kann | Problem ist meistens auf Unerfahrenheit zurückzuführen; Es verschwindet mit einiger Übung in der Systemnutzung |
| Teilweise Erektion | Nicht genügend Trainingseinheiten mit dem System | Mehr Trainingseinheiten mit dem System | Das Problem verschwindet normalerweise mit etwas Übung |
| Schneller Abfall der Erektion (in weniger als 5 Minuten) | Vakuumverlust aufgrund von Lufteintritt; Schlechte Abdichtung; Zu viel Schamhaar; Zu großer Erektion-Assistenzring | Wie bei "Keine Erektion"; Nutzen Sie einen kleineren oder zwei Erektion-Assistenzringe; Entfernen Sie die Ringe vorsichtig | Es ist notwendig verschiedene Ringgrößen auszuprobieren; Konsultieren Sie Ihren Arzt, falls Sie Hilfe oder Unterstützung benötigen. |
| Zug am Hodensack | Dichtungsgel am Hodensack; unangebrachte Pumptechnik; Unerfahrenheit mit dem System | Entfernen Sie das Dichtungsgel vom Hodensack; setzen Sie die Übungseinheit fort; Drücken Sie den Zylinder während des Gebrauchs nach unten | Problem kann mit mehr Erfahrung im Umgang mit dem System verschwinden |
| Unbehagen oder Schmerzen während des Pumpprozesses | Zu schnelles Pumpen; Zug am Hodensack | Langsames Pumpen; setzen Sie den Pumpprozess fort | Problem kann mit mehr Erfahrung im Umgang mit dem System verschwinden |
| Problem mit dem Erektion-Assistenzring | Zu kleiner Erektion-Assistenzring; Besorgnis | Verwenden Sie einen größeren Erektion-Assistenzring | Problem mit mehr Erfahrung im Umgang mit dem System verschwinden |
| Problem während des Geschlechtsverkehrs | Schlechte Abdichtung, Druck auf einer sensiblen Stelle | Mehr Dichtungsgel; Veränderung der Position | |
| Problem während des Ejakulierens | Lange Periode ohne Sex; Infektion oder Schwellung der Prostata | Setzen Sie die Behandlung mit dem System fort | Problem mit mehr Erfahrung im Umgang mit dem System verschwinden; falls Unbehagen oder Schmerzen anhalten sollten Sie einen Arzt aufsuchen |
| Rötungen, Hautirritationen, Bluterfüsse | Zu schnelles Pumpen; Überpumpen | Langsames Pumpen; weniger Pumpen | Konsultieren Sie Ihren Arzt wenn, das Problem auch nach den ersten Übungseinheiten anhält |
| Penis fühlt sich (für Sie oder Ihren Partner) kalt an | Abschnüren des Blutflusses zum Penis; Abdichtung durch Dichtungsgel | Waschen Sie das Dichtungsgel ab oder erwärmen Sie dieses vor dem Gebrauch | |
| Penis schwankt an der Basis | Abschnüren des Blutflusses zum Penis | Falls möglich, wenden Sie das System an, nachdem sich eine teilweise Erektion eingestellt hat | |

- ❗ Sie werden bei der Ausführung des Vakuums einen Druck verspüren. Dies ist nicht gefährlich. Falls Sie ein Unbehagen verspüren, könnte dies ein Anzeichen dafür sein, dass Sie zu schnell pumpen. Drücken Sie einfach den manuellen Vakuumreduzierungsknopf. Warten Sie einen Moment und bauen Sie ein neues Vakuum auf.
- ❗ Ihr Penis kann sich nach der Nutzung des Erektion-Assistenzring ein wenig bläulich verfärben. Dies kann eine normale Antwort auf den erhöhten Blutfluss sein. Die blaue Verfärbung sollte nach dem Entfernen des Unterstützungsrings verschwinden.
- ❗ Bei anfänglicher Nutzung des Systems kann es zu Petechien (kleine rötliche Punkte unterhalb der Haut) und Blutergüssen kommen. Dies kann daran liegen, dass der Penis einem zu großen negativen Druck für zu lange Zeit ausgesetzt wird oder dass Sie seit Längerem keine Erektion mehr hatten. Falls dies für Sie zutreffend ist, stoppen Sie solange mit der Behandlung bis die Rötungen oder Blutergüsse komplett verschwunden sind. Dies dauert im Allgemeinen 5-7 Tage.
- ❗ Der Penis könnte sich für Sie oder Ihren Partner etwas kälter anfüllen. Diese Kälte ist normal und nicht gefährlich. Dies ist auf die Reduzierung des Blutflusses, die durch den Erektion-Assistenzring hervorgerufen wird zurückzuführen.
- ❗ Ihr Penis „schwankt“ etwas an der Basis. Es kann vorkommen, dass Ihr Penis an seiner Basis etwas schwankt, wenn der Erektion-Assistenzring angebracht wurde. Falls dies für Sie zutreffend ist, kann es möglich sein, dass Sie verschiedene Positionen für den erfolgreichen Geschlechtsverkehr ausprobieren müssen.
- ❗ Es kommt zu keinem Samenerguss nach dem Höhepunkt. Der Druck der vom Erektion-Assistenzring ausgeht kann den Ejakulationsprozess beeinträchtigen. Dies ist nicht gefährlich und wirkt sich nicht negativ auf den Höhepunkt aus. Der Samen kann nach dem Abnehmen des Rings herausfließen. Die Erektion-Assistenzringe sind keine Verhütungsmittel und sollten nicht zur Vermeidung von Schwangerschaften genutzt werden.
- ❗ Der Penis Zylinder beschlägt von Innen. Der Grund hierfür ist das Wechselspiel zwischen Ihrer Körperwärme und dem kälteren Dichtungsgel. Das Beschlagen kann dadurch vermieden werden, dass man vor dem Gebrauch des Systems warmes Wasser über den Zylinder laufen lässt.
- ❗ Das Nutzen des **Androvacuum®** kann zu Rötungen oder Rissen der Blutgefäße unter der Haut oder in tieferem Gewebe des Penis oder Hodensacks führen. Hierdurch kann es zu Blutungen kommen, die in Schwellungen resultieren. Seien Sie nicht beunruhigt falls Sie Rötungen oder kleine rötliche Punkte am Penis feststellen. Ein Grund hierfür kann sein, dass Sie schon seit längerem keinen Sex mehr gehabt haben. Sie sollten die Behandlung mit dem System solange unterbrechen, bis diese Probleme vollständig geheilt sind (5 oder 6 Tage). Wenn Sie das System erneut benutzen ist es wichtig, dass Sie kein größeres Vakuum, als für Sie komfortable ist, anwenden. Seien Sie vorsichtig bei der Entfernung des Erektion-Assistenzrings und nutzen Sie ausreichend Wasser.

- ❗ Falls Sie Anzeichen für Erektionsstörungen feststellen können (z.B. das Unvermögen eine Erektionen, die stark genug für den Geschlechtsverkehr ist, aufrechtzuerhalten), sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie mit der Nutzung des Systems beginnen, um so eine mögliche schädliche Verspätung in der Entdeckung der häufigsten dieser Zustände, wie Diabetes, Multiples Sklerose, Leberzirrose, chronischer Niereninsuffizienz oder Alkoholismus, zu vermeiden.
- ❗ Tragen Sie den Erektion-Assistenzring nie länger als 30 Minuten. Er könnte Schmerzen, Rötungen und Blutergüsse, oder eine permanente Penisverletzung hervorrufen. Wenden Sie sich an Ihren Arzt falls Probleme auftreten und setzen Sie die Behandlung mit dem System nicht fort.
- ❗ Falls Sie diese Anleitungen nicht befolgen, kann dies persönliche Schäden zur Folge haben.

Androvacuum® wird keine Beziehungsprobleme oder körperliche Probleme, wie z.B. eine schwache sexuelle Lust, eine zurückgegangene Empfindlichkeit oder permanente Ejakulationsprobleme, beheben.

Falls Sie unter Sichelzellenanämie oder langanhaltenden Erektionen leiden, oder Sie große Mengen Aspirin oder Blutverdünner benutzen, benutzen Sie den **Androvacuum®** nicht ohne vorher Ihren Arzt konsultiert zu haben.

- ❗ Ein Missbrauch von **Androvacuum®** oder der Erektion-Assistenzringe können bereits bestehende medizinische Zustände, wie z.B. Peyronie (ein Zustand der eine Krümmung des erigierten Penis zur Folge hat), langanhaltende Erektionen oder eine verengte Harnröhre verstärken.
- ❗ Ein Missbrauch von **Androvacuum®** oder der Erektion-Assistenzringe können in einer Anschwellung des Penis und ernsten, permanenten Penisverletzungen führen.
- ❗ Eine häufige Nutzung des Erektion-Assistenzrings können zu Rötungen, Blutergüssen und Schmerzen an der Penisbasis (die Stelle an der der Penis auf den Körper trifft) führen.
- ❗ Es wird dazu geraten den Erektion-Assistenzring aufgrund von möglicher Narbenbildung und später Beeinträchtigungen vorsichtig zu entfernen. Wenden Sie das Vacuum schrittweise an. Untersuchen Sie Ihren Penis nach Rötungen oder Krümmungen.




www.androvacuum.com

Manufactured in USA by:

Pos - T - Vac Medical, Inc, 1701 N. 14th Avenue, Po Box 1436, Dodge City, KS 67801 USA. 

European authorized representative:

CEpartner4U BV, Esdoornlan 13, 3951DB Maarn, the Netherlands. 

Imported and Distributed in the European Union by:

Andromedical, S.L. Norias, 80, 28221 Majadahonda, Spain

email: support@andromedical.com

© Copyright 2015 Andromedical®, Madrid (Spain).